



「免沖洗密封式」便廁椅 !!!

Wrappon·AILE2



日常護理及照顧

在有行動不便長者的家庭、中心或院舍中，幫助長者如廁的配套及照料更顯重要。Wrappon能把排泄物密封，免沖洗的同時亦能隔絕異味及細菌，避免交叉感染。它的高度可調較，座椅配有正常的坐位墊，放置於床邊，非常方便。它可以同時方便使用者，亦能減輕護理人員的負擔。



* 四種顏色可供選擇
湖水綠色、米色、深啡色、粉紅色

如何使用 Wrappon·AILE2

Wrappon·Aile2 操作簡單，只需按下按鈕，任何人都可以輕鬆使用這個廁所。



倒入指定的凝結劑
使排泄物水份凝固。



按下按鈕
上完廁所後，按下按鈕，密封開始。



密封完成
聽到嘩嘩聲後，密封膜將自動掉下。衛生乾淨。




wrappon · AILE 2

VS

一般便廁椅

 <p>容易清潔 有自動封包排泄物的功能，免沖洗。</p>	<p>清洗過程高厭惡性</p>
 <p>消除臭味 使用密封袋，緊密封包排泄物，防止臭味散發於房內。</p>	<p>散發臭味，影響心情</p>
 <p>操作簡單 操作簡單使用前倒入凝固劑，使用後按下按鈕，可自行操作。</p>	<p>使用簡單，但功能欠佳</p>
 <p>減輕負擔 可以自行處理，不用浪費時間並減輕負擔。</p>	<p>清潔需時，負擔增加</p>
 <p>改善衛生 把排泄物密封，衛生環境得以改善。減少了細菌滋生及交叉感染的機會。</p>	<p>細菌滋生，衛生欠佳</p>

自動密封功能

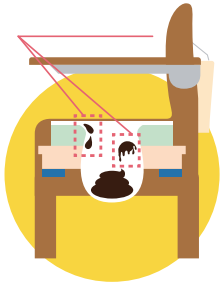

1. 開始密封

上完廁所後，按下按鈕開始。




2. 下拉密封膜

密封膜的濺起區域一併下拉，確保能密封所有排泄物。



3. 熱封密封膜

把密封膜的開口熱封，密封排泄物。

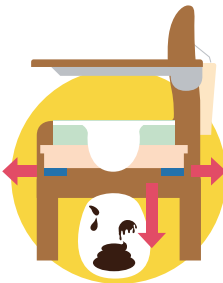

4. 密封膜掉下

兩秒後，密封膜將自動掉下。



方便操作

兩秒後，密封膜將自動掉下。

密封膜的濺起區域一併下拉，開口熱封後，密封排泄物。

熱封包

難聞氣味一併密封。

完美的密封排泄物



佳澤工程有限公司
Delta Pyramax Engineering Ltd.

3/F, Unit A, Kader Building, 22 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, HK
Phone +852 2511 2118 | joyceli@dpx.hk | www.healthyageing.com.hk